

FOURS HAUTE TEMPÉRATURE

01-01-2010

Four à moufle M110 HERAEUS

Chauffage par rayonnement

Fibre d'isolation en céramique en plusieurs couches assurant **une isolation très efficace**

Boîtier extérieur séparé du boîtier intérieur, assurant une température externe peu élevée qui ne dépasse pas 80°C .

Porte pivotante latéralement **protégeant l'utilisateur** de la face chaude lors de l'ouverture.

Arrêt automatique du chauffage du four lors de l'ouverture de la porte.


Tous les éléments de contrôle sont placés dans un boîtier séparé, situé dans la partie basse du four

Equipé soit d'un contrôleur électronique DIGICON (en standard) soit d'un programmeur électronique THERMICON P.

Le programmeur THERMICON P comporte 9 paliers au maximum, une indication de la valeur de consigne et réelle de température, ainsi qu'une fonction de mise en route et d'arrêt par temps présélectionné.

Caractéristiques Techniques

Température Maximum	1100°C
Volume utile	9 litres
Dimensions (HxLxP) utiles / externes	200x150x300/576x752x720mm
Poids	78kg
Puissance de raccordement	2,9kW
Tension de raccordement	230V 50/60Hz
Temps de montée en T° (1000°C)	100min
Puissance de maintien à 1 100°C	1.4 kW
Homogénéité de T°, axe central	13 K° max
Température parois externes	<80°C

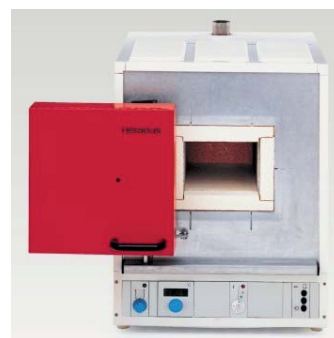

Référence	Désignation	Prix
MODELES STANDARD		
51010272	Four M110 Standard + DIGICON et sécurité haute température	€ 4.289,00
50057440	Four M110 Standard + DIGICON, sécurité haute température et minuterie 24h	€ 4.392,00
51010808	Four M110 Standard + DIGICON, sécurité haute température, cheminée et ventilateur d'extraction	€ 5 160,00
50056360	Four M110 Standard + DIGICON, sécurité haute température, cheminée, ventilateur d'extraction et minuterie 24h	€ 5 258,00
MODELES CONFORT		
51000802	Four M110 Deluxe + THERMICON P et sécurité haute température	€ 5 045,00
51000808	Four M110 Deluxe + THERMICON P, sécurité haute température, cheminée et ventilateur d'extraction.	€ 5.901,00
ACCESSOIRES		
50006394	Cheminée d'extraction simple	211.00
50006408	Sole de fond en acier réfractaire	93.00
OPTIONS		
50044447	Certificat de calibration à 900°C au centre de la chambre	330.00
50044188	Calibration pour une température supplémentaire (maximum 2)	210.00

